



Drenaje M•Drain®

Familia de Catéteres

Catálogo




FAMILIA M•DRAIN®

Familia de Catéteres de Drenaje y Accesorios

Mermaid Medical ofrece un amplio rango de catéteres de drenaje diseñado para un drenaje eficiente con prioridad absoluta en la seguridad.

Nuestra amplia serie de productos incluye una variedad de drenajes, guías y otros accesorios para apoyar las necesidades individuales. Adicionalmente, disponemos de amplia oferta de calibres y longitudes para cubrir todo tipo de demanda en los procedimientos.

La Serie M-Drain® de Mermaid Medical proporciona catéteres y accesorios seguros y funcionales a médicos y hospitales para proporcionar todo lo necesario en una sola compra.

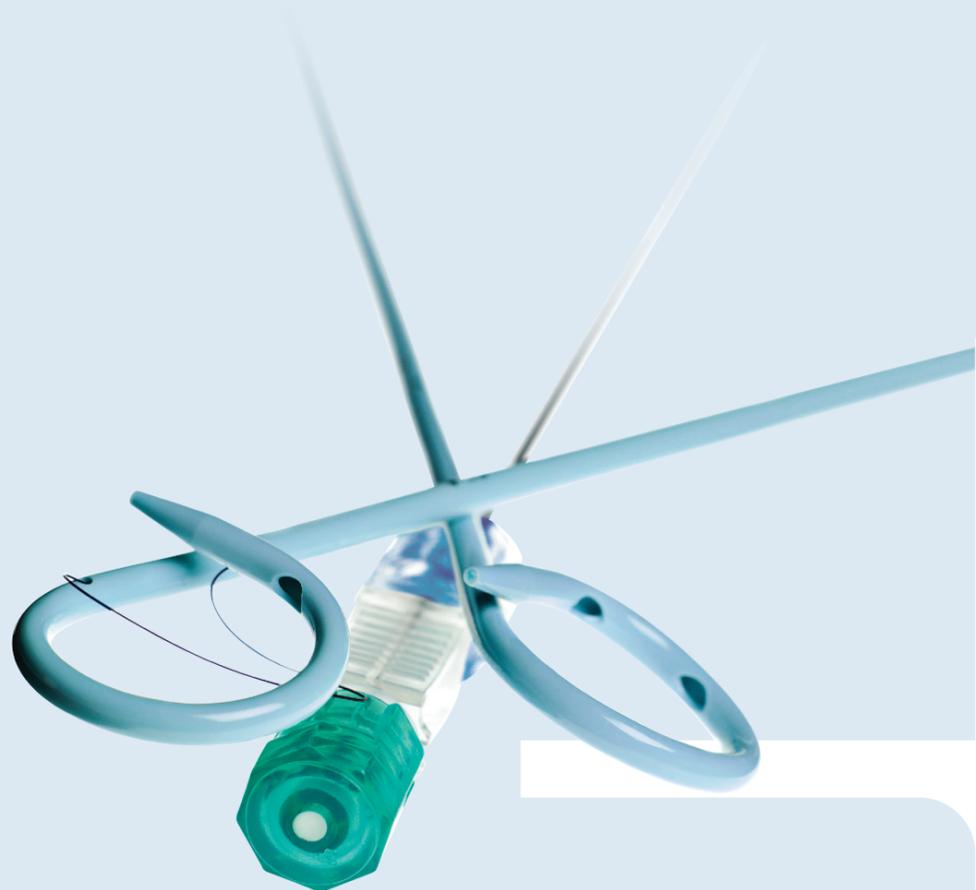

Mermaid Medical Group es una empresa privada establecida en 2007. Desarrollamos, fabricamos y distribuimos dispositivos médicos a hospitales y otros usuarios en Europa, Estados Unidos y Asia. Trabajamos principalmente en soluciones a problemas del Sistema vascular así como otros dispositivos en radiología intervencionista. Nos esforzamos por ser el mejor socio para fabricantes, hospitales y profesionales sanitarios para que juntos podamos ayudar incluso a más pacientes.

TABLA DE CONTENIDOS

M•Drain® Catéteres de Drenaje Multipropósito

- M•Drain® Catéter de Drenaje de Un Solo Paso – Con o Sin Hilo de Retención
- M•Drain® Catéter de Drenaje de Nefrostomía
- M•Drain® Catéter de Drenaje de Un Solo Paso- Mini Pigtail
- M•Drain® Catéter de Drenaje Biliar – Con o Sin Hilo de Retención



M•Drain® Catéter de Centesis



M•Drain® Set Introdutor Percutáneo



Guías

- Guía Amplatz®
- Guía Lunderquist
- Guía.018"



Accesorios M•Drain®

- Aguja Access
- Tubos Conectores M•Drain®
- Bolsas de Drenaje M•Drain®





Familia de Catéteres de Drenaje y Accesorios M-Drain®


La serie M-Drain® de Mermaid Medical proporciona catéteres y accesorios seguros al personal sanitario y hospitales para una compra completa

El diseño de los catéteres M-Drain® ha sido especialmente fabricado para mejorar el cuidado del paciente proporcionando al médico mayor facilidad de uso.

Todos los catéteres M-Drain® son multipropósito y pueden, por lo tanto, utilizarse para una variedad de aplicaciones de drenaje, incluyendo además abscesos, nefrostomía, biliar y centesis.

La colocación del catéter se lleva a cabo por Punción Directa o con la Técnica Seldinger.

Cuando utiliza la serie M-Drain®, tiene garantizado que los catéteres y accesorios son tecnología punta, y cubren con esta línea todas las necesidades para el drenaje.

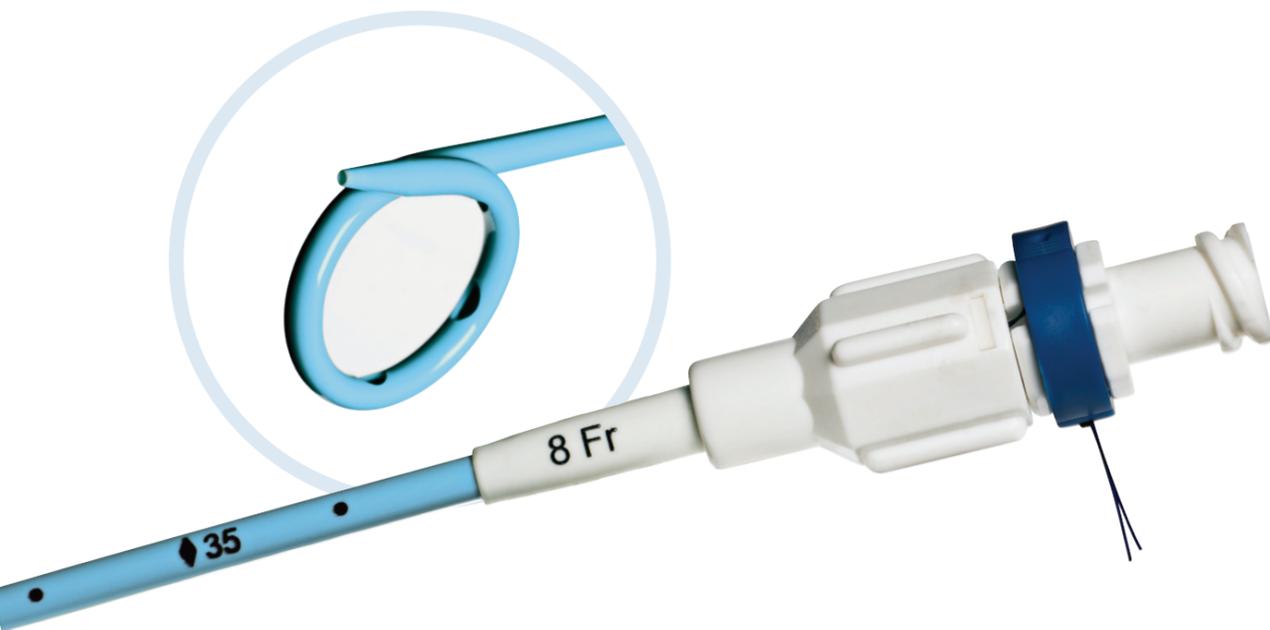

Todos los Catéteres M-Drain® Incorporan Estas Características de Diseño Mejoradas

- Agujeros ovalados “biselados” que promueven mayor flujo y reducen la obstrucción.
- Punta estilizada, reforzada, cónica, con diseño “antiacordeón” para inserción suave.
- El diámetro interno del catéter y conector van acordes para drenar el máximo flujo.
- Revestimiento hidrofílico que reduce la fricción, favorece la fácil introducción del catéter.

Catéter de Punción Directa M-Drain® – Con y Sin Hilo de Retención

Características de todos los catéteres M-Drain® con y sin hilo de retención pigtail.

Catéter de Drenaje de Nefrostomía M-Drain®

Diseñado para colocarse con técnica Seldinger. El catéter viene con hilo de retención del pigtail.


Catéter de Punción Directa M-Drain® – Mini Pigtail

Catéter de drenaje ideal para pequeñas zonas o pacientes más pequeños.

El diámetro del pigtail es aproximadamente un 10-15% menor que el del catéter estándar.

Catéter de Drenaje Biliar M-Drain® – Con y Sin Hilo de Retención

Un marcador radiopaco identifica la localización del orificio de drenaje proximal para ayudar con su posicionamiento.

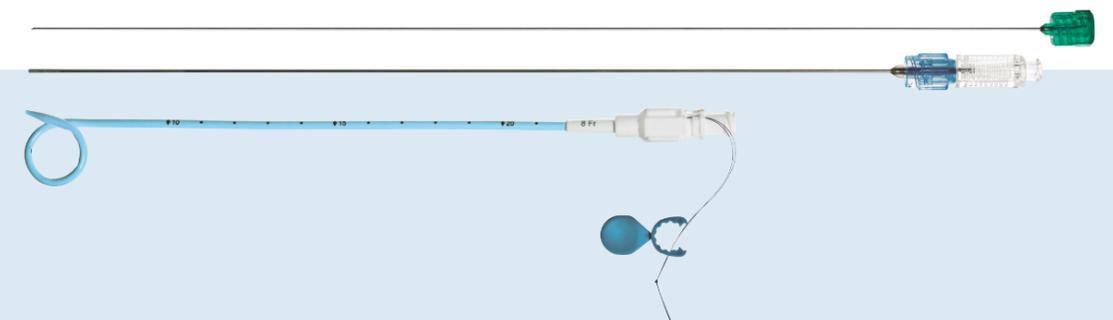




Catéter de Centesis M·Drain®

El Catéter de Centesis M·Drain® es un catéter montado sobre una aguja diseñado para la aspiración de pequeños abscesos de fluido y procedimientos de drenaje de corta duración.

Ambos, catéter y aguja están diseñados para minimizar el trauma.

Características:

- Dos grandes orificios ovalados “biselados” permiten gran capacidad de drenaje con reducción de obstrucción.
- Un afinamiento exclusivo que proporciona transición suave entre la aguja y el catéter para facilitar la colocación precisa.
- Catéter revestido para fácil inserción.
- Tapón poroso del conector para permitir la salida de aire durante la inserción y proteger al médico de la salida de líquido.

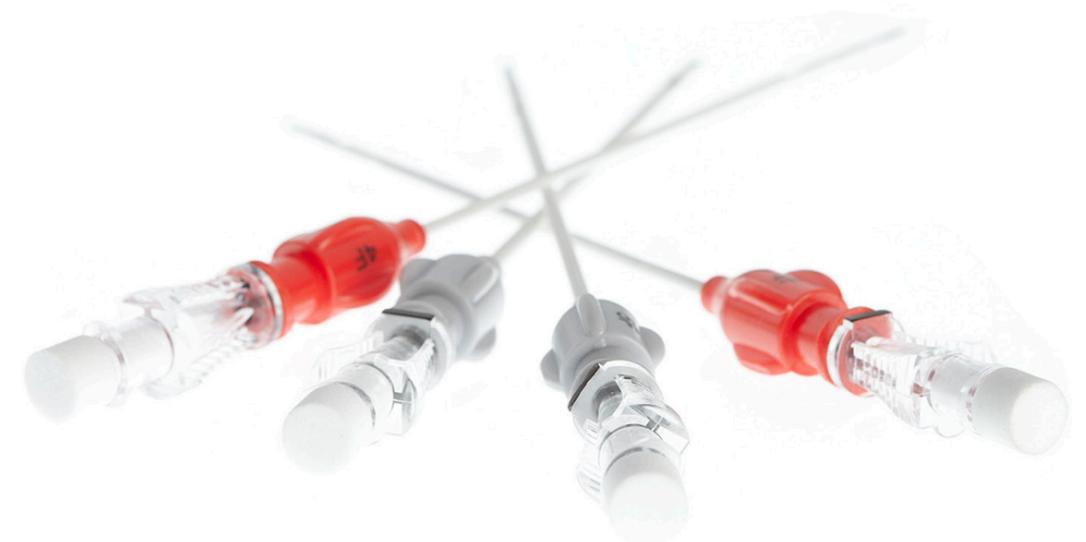



Set Introdutor Percutáneo M·Drain®

El Set Introdutor Percutáneo M·Drain® se utiliza para para acceso percutáneo con una sola punción para la colocación fácil y segura de la guía o catéter en procedimientos no vasculares.

El Sistema coaxial con revestimiento hidrofílico M·Drain® se compone de aguja trocar o chiba de 21G/22G para minimizar el daño del tejido.

El set incluye una guía de 60 cm en nitinol o acero inoxidable con punta curvada y revestimiento de oro para mejor visualización.

Características:

- Diseño cónico de la punta del catéter coaxial para colocación atraumática y suave de guías de hasta 0.038".
- Suave transición entre el dilatador de 4Fr y la vaina de 6Fr que facilita su inserción.
- Marca radiopaca integrada para mejorar la visibilidad.
- Marcas centimetradas en la aguja para colocación precisa.



Guías


La Guía Amplatz® está fabricada con una técnica de revestimiento que le hace segura y flexible. El revestimiento de PTFE se aplica utilizando la última tecnología y asegura una superficie de baja fricción.

La Guía Lunderquist es una guía extremadamente rígida que se usa para proporcionar mayor apoyo durante procedimientos no vasculares. Punta flexible para zonas delicadas o difíciles.

La Guía Access de .018" está diseñada especialmente para procedimientos no vasculares.

Está disponible en dos versiones, acero inoxidable (rígida) y nitinol (flexible).

Todas las guías se suministran en dispensador circular para facilitar el lavado de la guía.

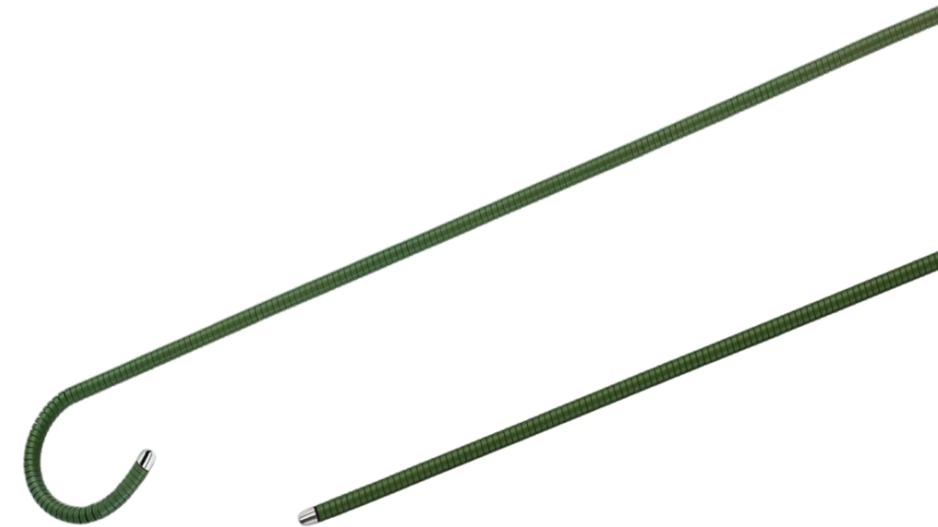



Accesorios M•Drain®

Aguja Access

- Tratamiento especial en la punta que la hace ecogénica para mejor visualización durante el posicionamiento.
- Conector Luer lock transparente para confirmación visual de fluido retrospectivo.
- Marcas centimetradas para control de profundidad preciso.



Tubos Conectores M•Drain®

- Resistente al acodamiento, tubo flexible.
- Tubo blando transparente.
- Conexión luer lock estándar.



M•Drain® Bolsas de Drenaje M•Drain®

- Parte trasera suave reduce la incomodidad de la piel.
- Válvula antirreflujo previene la contaminación bacteriana retrógrada y minimiza el riesgo de infección.
- Tamaño discreto - invisible bajo la ropa.



Referencias y Especificaciones

M-Drain® Catéter de Drenaje de Un Solo Paso – Con o Sin Hilo de Retención

Referencia	Versión	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
D10505015-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	5F x 15 CM	5
D10505020-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	5F x 20 CM	5
D10506015-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	6F x 15 CM	5
D10506020-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	6F x 20 CM	5
D10506025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	6F x 25 CM	5
D10506030-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	6F x 30 CM	5
D10507020-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	7F x 20 CM	5
D10507025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	7F x 25 CM	5
D10507030-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	7F x 30 CM	5
D10508020-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	8F x 20 CM	5
D10508025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	8F x 25 CM	5
D10510020-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	10F x 20 CM	5
D10510025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	10F x 25 CM	5
D10510030-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	10F x 30 CM	5
D10512025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	12F x 25 CM	5
D10512030-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	12F x 30 CM	5
D10514025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	14F x 25 CM	5
D10516025-CE	Punción directa	Sin hilo de retención	16F x 25 CM	5
D11006020-CE	Punción directa	Con hilo de retención	6F x 20 CM	5
D11006025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	6F x 25 CM	5
D11006035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	6F x 35 CM	5
D11007015-CE	Punción directa	Con hilo de retención	7F x 15 CM	5
D11007020-CE	Punción directa	Con hilo de retención	7F x 20 CM	5
D11007025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	7F x 25 CM	5
D11007035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	7F x 35 CM	5
D11008020-CE	Punción directa	Con hilo de retención	8F x 20 CM	5
D11008025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	8F x 25 CM	5
D11008030-CE	Punción directa	Con hilo de retención	8F x 30 CM	5
D11008035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	8F x 35 CM	5
D11010015-CE	Punción directa	Con hilo de retención	10F x 15 CM	5
D11010020-CE	Punción directa	Con hilo de retención	10F x 20 CM	5
D11010025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	10F x 25 CM	5
D11010030-CE	Punción directa	Con hilo de retención	10F x 30 CM	5
D11010035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	10F x 35 CM	5
D11012025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	12F x 25 CM	5
D11012035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	12F x 35 CM	5
D11014025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	14F x 25 CM	5
D11014035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	14F x 35 CM	5
D11016025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	16F x 25 CM	5
D11016035-CE	Punción directa	Con hilo de retención	16F x 35 CM	5

M-Drain® Catéter de Drenaje de Nefrostomía

Referencia	Versión	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
D12007025-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	7F x 25 CM	5
D12007035-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	7F x 35 CM	5
D12008025-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	8F x 25 CM	5
D12008035-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	8F x 35 CM	5
D12010035-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	10F x 35 CM	5
D12012035-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	12F x 35 CM	5
D12014035-CE	Nefrostomía	Con hilo de retención	14F x 35 CM	5

M-Drain® Catéter de Drenaje de Un Solo Paso- Mini Pigtail

Referencia	Versión	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
D13006015-CE	Punción directa	Con hilo de retención	6F x 15 CM	5
D13006020-CE	Punción directa	Con hilo de retención	6F x 20 CM	5
D13008025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	8F x 25 CM	5
D13010025-CE	Punción directa	Con hilo de retención	10F x 25 CM	5

M-Drain® Catéter de Drenaje Biliar – Con o Sin Hilo de Retención

Referencia	Versión	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
D14008040-CE	Biliar	Con hilo de retención	8F x 40 CM	5
D14010040-CE	Biliar	Con hilo de retención	10F x 40 CM	5
D14012040-CE	Biliar	Con hilo de retención	12F x 40 CM	5
D14014040-CE	Biliar	Con hilo de retención	14F x 40 CM	5
D14508040-CE	Biliar	Sin hilo de retención	8F x 40 CM	5
D14510040-CE	Biliar	Sin hilo de retención	10F x 40 CM	5
D14512040-CE	Biliar	Sin hilo de retención	12F x 40 CM	5
D14514040-CE	Biliar	Sin hilo de retención	14F x 40 CM	5

M-Drain® Catéter de Centesis

Referencia	Versión	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
D40104007-CE	Centesis	Catéter y aguja	4F x 7 CM	10
D40104010-CE	Centesis	Catéter y aguja	4F x 10 CM	10
D40104015-CE	Centesis	Catéter y aguja	4F x 15 CM	10
D40105007-CE	Centesis	Catéter y aguja	5F x 7 CM	10
D40105010-CE	Centesis	Catéter y aguja	5F x 10 CM	10
D40105015-CE	Centesis	Catéter y aguja	5F x 15 CM	10
D40105020-CE	Centesis	Catéter y aguja	5F x 20 CM	10



Referencias y Especificaciones

M-Drain® Set Introductor Percutáneo

Referencia	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
DS2010100-CE	Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introductor Coaxial Guía de .018" de acero inoxidable con punta curvada, flexible y revestimiento de oro (60cm) Aguja de 21Ga x 15 cm Trócar, Ecogénica	6F x 20 CM	10
DS2010200-CE	Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introductor Coaxial Guía de .018" de nitinol con punta curvada, flexible y revestimiento de oro (60cm) Aguja de 21Ga x 15 cm Trócar, Ecogénica	6F x 20 CM	10
DS2010300-CE	Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introductor Coaxial Guía de .018" de acero inoxidable con punta curvada, flexible y revestimiento de oro (60cm) Aguja de 22Ga x 15 cm Chiba, Ecogénica	6F x 20 CM	10
DS2010400-CE	Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introductor Coaxial Guía de .018" de nitinol con punta curvada, flexible y revestimiento de oro (60cm) Aguja de 22Ga x 15 cm Chiba, Ecogénica	6F x 20 CM	10

Guía Amplatz®

Referencia	Versión	Especificaciones /Tamaño	Cant/caja
G61135090	PTFE (Recta)	.035"x 90 cm 7.5 cm punta blanda	10
G61135150	PTFE (Recta)	.035"x 150 cm 7.5 cm punta blanda	10
G61135180	PTFE (Recta)	.035"x 180 cm 7.5 cm punta blanda	10
G61135260	PTFE (Recta)	.035"x 260 cm 7.5 cm punta blanda	10
G61235080	PTFE (Recta)	.035"x 80 cm 3.5 cm punta blanda	10
G61235150	PTFE (Recta)	.035"x 150 cm 3.5 cm punta blanda	10
G61235180	PTFE (Recta)	.035"x 180 cm 3.5 cm punta blanda	10
G61235260	PTFE (Recta)	.035"x 260 cm 3.5 cm punta blanda	10
G61335090	PTFE (3 mm J Curvada)	.035"x 90 cm 7.5 cm punta blanda (3 mm J).	10

Guía Lunderquist

Referencia	Versión	Especificaciones /Tamaño	Cant/caja
G90128080	Acero Inoxidable (Recta)	.028" diámetro, 82.5 cm longitud con 7.5 cm punta alambre	10
G90135080	Acero Inoxidable (Recta)	.035" diámetro, 82.5 cm longitud con 7.5 cm punta alambre	10
G90335080	Acero Inoxidable (3 mm J Curvada)	.035" diámetro, 82.5 cm longitud con 7.5 cm punta alambre	10

.018" Guía Access Punta de Oro

Referencia	Versión	Especificaciones /Tamaño	Cant/
G70918080	Acero Inoxidable (Curvada)	.018" x 80 cm, 6.5 cm Punta Tungsteno, punta blanda	10
G71018080	Nitinol (Curvada)	.018" x 80 cm, 6.5 cm Punta Tungsteno, punta blanda	10

M-Drain® Accesorios

Referencia	Versión	Especificaciones	Tamaño	Cant/caja
051810	Aguja Access Trocar	10 CM	18G	25
051815	Aguja Access Trocar	15 CM	18G	25
051820	Aguja Access Trocar	20 CM	18G	25
051825	Aguja Access Trocar	25 CM	18G	25
051910	Aguja Access Trocar	10 CM	19G	25
051915	Aguja Access Trocar	15 CM	19G	25
051920	Aguja Access Trocar	20 CM	19G	25

M-Drain® Tubos conectores

Referencia	Versión	Especificaciones /Tamaño	Cant/caja
B-806805	Macho/Embudo - estéril	15 cm	25
B-806806	Macho/Embudo - estéril	30 cm	25
B-806815	Macho/Embudo - estéril	15 cm with llave de 1 vía	25
B-806816	Macho/Embudo - estéril	30 cm with llave de 1 vía	25
B-806835	Macho/Embudo - estéril	15 cm with llave de 3 vías	25
B-806836	Macho/Embudo - estéril	30 cm with llave de 3 vías	25
B-806845	Macho/luer lock - estéril	15 cm con llave de tres vías (75 PSI)	25
B-806846	Macho/luer lock - estéril	30 cm con llave de tres vías (75 PSI)	25

M-Drain® Bolsa de Drenaje

Referencia	Versión	Especificaciones /Tamaño	Cant/caja
A10500350	Hembra - estéril	350 ml - Incl. 5 unid. Cintas anti-deslizamiento para pierna	50
A10500750	Hembra - estéril	750 ml - Incl. 2 unid. Cintas anti-deslizamiento para pierna	25
A10602000C	Macho- estéril	2000 ml - Tubo conector de 80 cm con pinza	50





mermaid medical®

Mermaid Medical Iberia S. L.

Plaza de Grecia 1, local 19 · 45005 Toledo

customer@mermaidmedical.es · www.mermaidmedical.com

Tel: +34 925 717 378 · Fax: +34 925 049 112